

Informacije o Proizvodu

SOUNDCLIP-A

SoundClip-A je uređaj "napravljen za sve telefone", koji povezuje 2.4 GHz bežične slušne aparate kompanije Bernafon preko Bluetooth®-a sa modernim mobilnim telefonima¹ i drugim audio uređajima. On omogućava da se slušni aparati koriste kao stereo slušalice za striming muzike i da se telefonski

razgovori čuju u oba uva bez korišćenja ruku. SoundClip-A radi i kao daljinski mikrofonski uređaj za poboljšano razumevanje govora u izazovnim situacijama za slušanje 1 na 1. Ovaj mali praktični dodatak takođe radi kao daljinski upravljač.



Slušalice za muziku

Zvuk/muzika sa Bluetooth®-om povezanih mobilnih telefona, tableta, MP3 plejera itd. strimuje se u stereo zvuku direktno u oba slušna aparata.

Slušalice za mobilne telefone

SoundClip-A može biti uparen sa modernim mobilnim telefonima¹ preko 2.4 GHz Bluetooth®-a, pretvarajući zapravo slušne aparate u visokokvalitetne slušalice. Zvuk sa mobilnog telefona bežično se strimuje direktno u oba uva, dok usmereni mikrofoni uređaja SoundClip-A prikupljaju glas nosioca uređaja.

Daljinski mikrofonski uređaj

SoundClip-A radi kao daljinski mikrofonski uređaj za poboljšanu razumljivost osobe koja govori i nosi ga, bilo na daljinu (do 20 metara), u veoma bučnim okruženjima ili u kombinaciji ova dva.

Kompjuter/Laptop


Ponekad je teško upariti/povezati se direktno sa ugrađenim Bluetooth®-om u kompjuteru. Stoga, SoundClip-A se može koristiti sa BT-D800 USB adapterom za lako povezivanje bez ikakvih problema.

¹ Molimo da posetite www.bernafon.com/products/accessories/ za dodatne informacije i podršku.

PREGLED PROIZVODA

Uključeno

- Uputstvo za upotrebu
- Obična i dugačka traka
- Strujni adapter za punjenje
- USB kabl za punjenje
- Zaštitna torbica

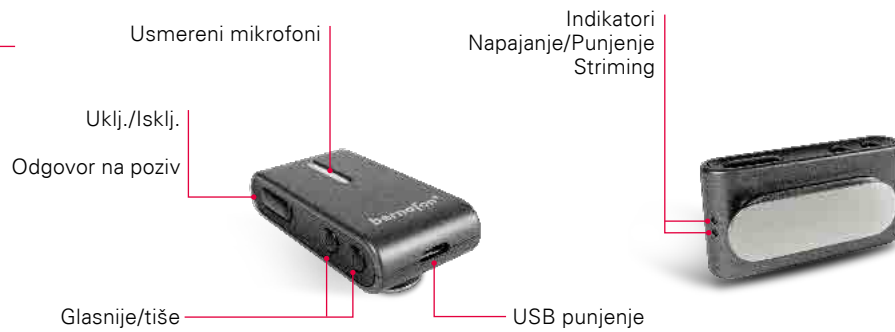

TEHNIČKI PODACI

Naziv/Model	SoundClip-A/AC1A
FCC/IC	FCC ID: 2ACAHAC01 IC: 11936A-AC01
Kompatibilnost	Bernafor 2.4 GHz bežični slušni aparati
Dimenzije	53 x 27 x 18 mm; težina 27 g
Uslovi korišćenja	Vlažnost: 15% do 93% relativne vlažnosti, bez kondenzovanja Radna temperatura: 5 – 40 °C Skladištenje i prevoz: –20 – 60 °C Slušalice mobilnog telefona (bez korišćenja ruku) i stereo muzika (A2DP)
Sistemske funkcije	Daljinski mikروفon
Daljinsko upravljanje slušnim aparatima	Promena jačine zvuka i programa i isključivanje mikrofona na slušnim aparatima
Baterija ²	Tipično dnevno korišćenje 16 sati: 2 sata audio striminga + 2 sata korišćenja telefona + 12 sati pripravnosti (standby) 36 h pripravnosti (uključen, bez striminga) Vreme punjenja: 2 sata Očekivano vreme trajanja baterije: Ostaje 80% kapaciteta nakon 720 ciklusa punjenja
Kvalitet zvuka ³	Stereo/20 kHz frekvencija odabiranja
Audio propusni opseg ³	80 Hz – 10 kHz
Detalji uparivanja	Do 8 uparenih Bluetooth® uređaja
Bluetooth® usaglašenost	Verzija 4.2 + EDR
Bluetooth® profili	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.3 Headset Profile (HSP) 1.2 Hands-Free Profile (HFP) 1.6 uključujući podršku za Wideband Speech
Bežični opseg ⁴	10 metara sa Bluetooth® uređajima klase 2 (npr. mobilni telefoni) do 20 metara između uređaja SoundClip-A i slušnih aparata
Frekvencija striminga	2.4 GHz (Bluetooth®)
Emisije	Maks. 17 dBm e.i.r.p. u skladu sa svim relevantnim standardima
Indikatori statusa	LED lampice na uređaju SoundClip-A. Zvučni signali na slušnim aparatima
Oasis ^{next} 2017.2 (ili novija verzija)	Podlašavanje striming programa

² Korišćenjem isporučenog punjača

³ Stvarne audio performanse zavise od slušnih aparata koje klijent nosi

⁴ U slučaju vidljivosti između uređaja SoundClip-A i drugih uređaja. Drugi uređaji koji rade na 2.4 GHz mogu izazvati smetnje i smanjiti opseg.

